

wok[®]



CE

weiko
health base

en

it

INDEX INDICE

Main characteristics	Caratteristiche generali	4
Colour	Colore	5
WOK basis	Base WOK	6
WOK mono-column	Mono montante WOK	7
Shelves	Ripiani	8
Drawers	Cassetti	9
Accessories	Accessori	10
Configuration examples	Esempi di configurazione	12

Main characteristics

Caratteristiche principali



The mono-column trolley "WOK" significantly differs, for its innovative design, from the design criteria previously used.

Very strong and compact, but at the same time multi-functional, it is ideal even for the use in areas with limited space.

"WOK" is made-up with very high resistance materials, as steel sheets epoxy powder coated, aluminium with superficial oxydation treatment, and special copolymers (basis).

"WOK" can be enriched with a wide range of accessories .

Il carrello mono montante "WOK" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.

Molto robusto e compatto, ma nello stesso tempo multifunzionale, è ideale per l'impiego anche in contesti con spazi ridotti.

"WOK" è realizzato con materiali ad altissima resistenza, quali acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, alluminio protetto da trattamento superficiale meccanico e chimico (ossidazione), speciali co-polimeri.

"WOK" Può essere arricchito con una ampia gamma di accessori.

Colour Colore

Standard color is gray ferromagnetic
Colore standard è grigio ferromicaceo



Colors available on request
Colori disponibili a richiesta

RAL1021		Yellow	Giallo
RAL6018		Green	Verde
RAL5017		Blue	Blu
RAL5012		Light blue	Azzurro
RAL3020		Red	Rosso

Basis WOK

Base WOK




The basis is made-up with very high resistance copolymers, reinforced with supporting ribs.

At customer's request, under the WOK's basis can be mounted the isolation transformer (800 VA, 1600 VA o 2000 VA).

The basis is equipped with two rear wheels (diameter 100 mm) and two front wheels (diameter 75 mm), with brake.



La base del carrello "WOK" è realizzata in copolimero ad altissima resistenza, rafforzata da nervature portanti che rendono ancora più solida e robusta la struttura.

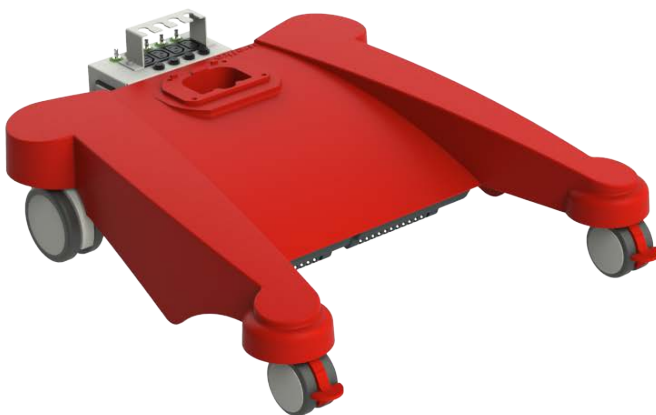

La base del carrello "WOK", su richiesta del cliente, può montare sotto la base il trasformatore di isolamento da 800 W, 1600 W o 2000 W.

La base del carrello "WOK" è dotata di due ruote posteriori del diametro di 100 mm e due ruote anteriori del diametro di 75 mm.

Mono-column WOK

Monomontante WOK

The mono-column is made-up with an extruded aluminium profile, protected by superficial oxydation treatment.

It has been designed in the following three different versions:

- STANDARD: with the possibility to accomodate inside it the power supply cables and those ones of the various signals connected to electro-medical equipment.
- BIG: allows to allocate inside it the power supply cables and those ones of the various signals connected to electro-medical equipment, as well as small groups of transformers and electrical outlets.
- UP & DOWN: enables the rapid repositioning of the entire "group shelves-monitor", so that the operator could be able to choose the most suitable working position.


The mono-column "WOK" can be produced in different heights according to the customer's need.

Il mono montante del carrello "WOK" è realizzato in profilato di alluminio estruso, protetto da un trattamento superficiale di ossidazione.

E' progettato in tre differenti versioni:

- STANDARD: con la possibilità di ospitare al suo interno i cavi di alimentazione elettrica e quelli dei diversi segnali relativi alle apparecchiature elettromedicali .
- BIG: consente di allocare al suo interno i cavi di alimentazione elettrica e quelli dei diversi segnali relativi alle apparecchiature elettromedicali, oltre a piccoli trasformatori e gruppi di prese elettriche.
- UP & DOWN: consente il riposizionamento rapido di tutto il "gruppo ripiani-monitor", per far scegliere all'operatore la posizione di lavoro più adatta.

Il monomontante "WOK", nelle varie versioni, può avere altezze diverse secondo le esigenze del cliente.

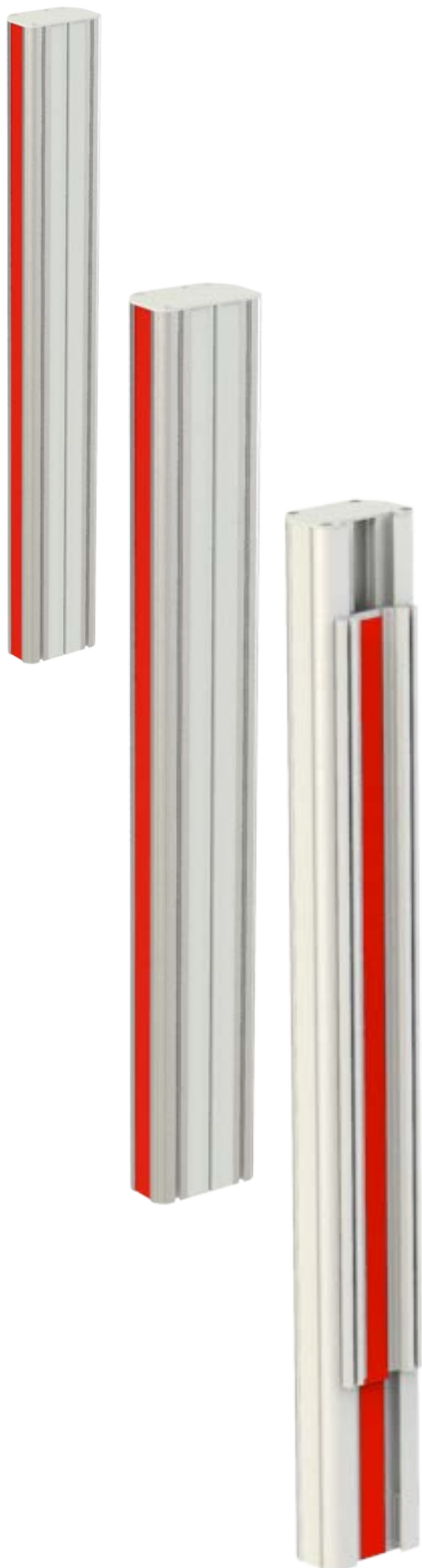

Shelves

Ripiani



Shelves are in steel sheets epoxy powder baked. They can be positioned at different heights, according to the customer needs.

Shelves can be realized in different sizes and also mounted in an inclined position, for a better monitor reading.

Il carrello monomontante WOK possiede ripiani in lamiera di acciaio verniciata a fuoco con polveri epossidiche, posizionabili a diverse altezze, secondo le esigenze del cliente.

I ripiani possono essere di dimensioni diverse e anche montati in posizione inclinata, per una migliore lettura dei monitor.

Some different types of shelves.
Alcune tipologie di ripiani.

Drawers Cassetti

Drawers are in steel sheets epoxy powder baked. They can be positioned at different heights, according to the customer needs.

Drawers can be realized in different sizes.

Il carrello monomontante WOK possiede cassetti in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, posizionabili a diverse altezze, secondo le esigenze del cliente.

I cassetti possono essere di dimensioni diverse.

Some different types of drawers.
Alcune tipi dei cassetti.



450x360x120 mm



400x360x120 mm



360x360x120 mm

Accessories

Accessori

Some different types of monitor holder / Vari tipi di supporti monitor:


- Monosolution



- Flex Arm



- double monitor holder / doppio supporto monitor

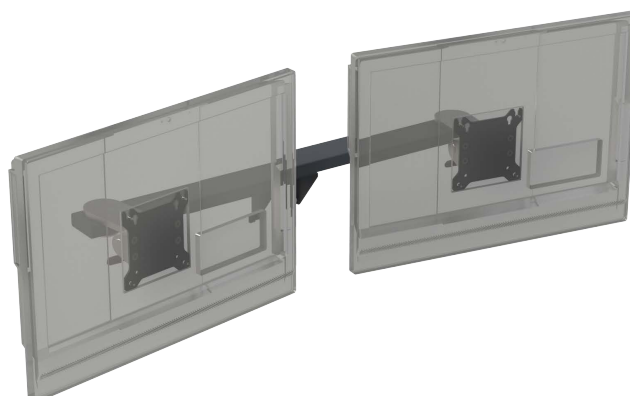

Some different types of basket / Vari tipi di cestelli:



cm 37x26,5x15



cm 30x16x14,5



cm 21x10x14,5

Some different types of accessories / Vari tipi di accessori:




Infusion stand holder
Asta porta flebo




Endoscopes holder
Asta porta endoscopi

Some different types of accessories / Vari tipi di accessori:

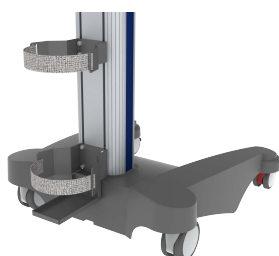

Cylinder holder
Supporto bombola

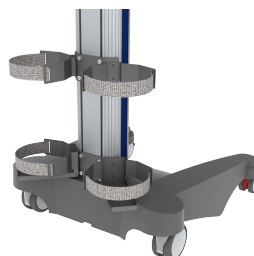



Double cylinder holder
Supporto bombole doppio

Configuration examples

Esempi di configurazione





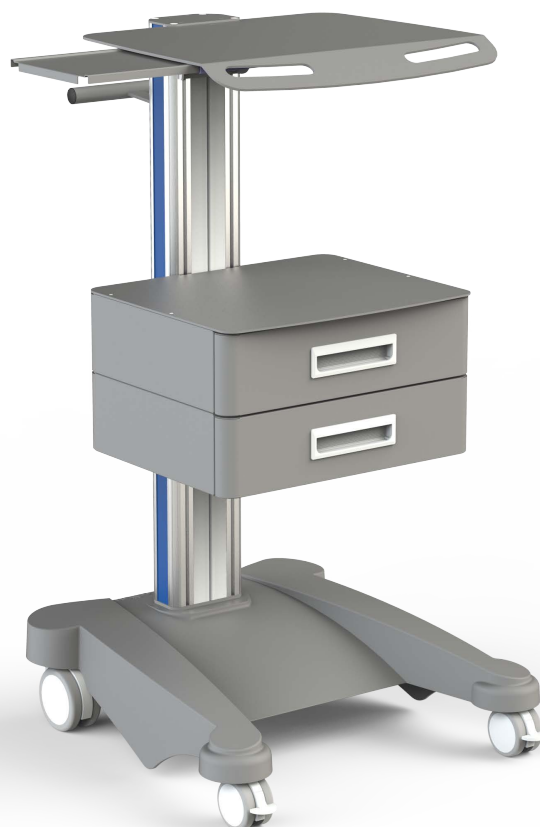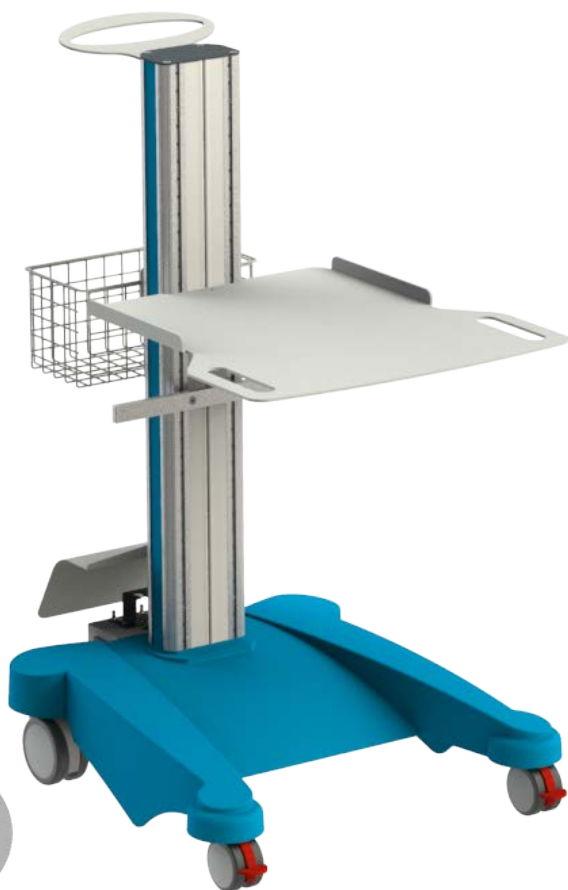

weiko®

health base

Head Office:
Viale Lincoln, 178
81100 - Caserta

Factory:
Zona ASI Aversa Nord
c/o Consorzio Siné
81032 - Carinara (CE) - Italy

Tel. +39 081 8654662 - Fax +39 081 8654723
www.weiko.com info@weiko.com

